

deprogramator - wykonanie



deprogramator - wykonanie

1) wyciski alginatowe, modele gipsowe



*) Wykonaj dwa górne i dwa wyciski dolne; jeden komplet modeli posłuży do wykonania deprogramatora, drugi komplet modeli zabierz ze sobą na kurs

deprogramator - wykonanie

- montaż modeli w MIP
- nie potrzeba rejestracji łukiem twarzowym
- nie potrzeba 'kęska zwarciowego'



deprogramator - wykonanie

- łuk wargowy
- obejmuje najbardziej dystalny ząb w łuku
- nie wchodzi na powierzchnię żującą




deprogramator - wykonanie

- płyta podniebienna
 - nie wchodzi na powierzchnię żującą zębów
 - nie przeszkadza w złożeniu modeli w MIP




deprogramator - wykonanie

- platforma
 - szerokość 3mm
 - platforma kontaktuje z dolnymi siekaczami
 - dyskluzja zębów bocznych 2 mm

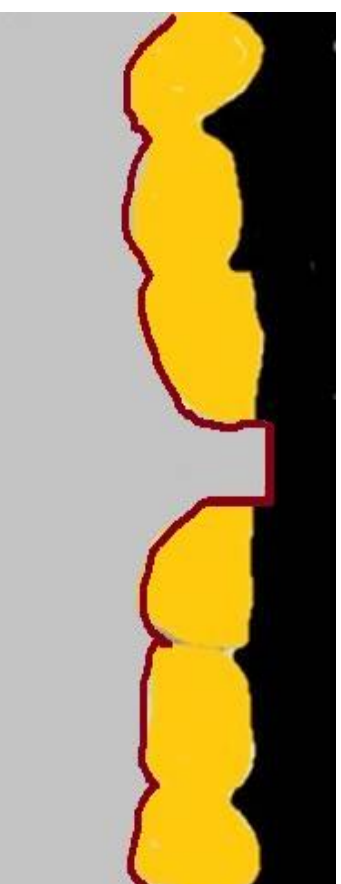

deprogramator - oddanie

- szerokość platformy 3mm
- ew. zabudować dolną diastemę
- dyskluzja zębów bocznych 1,5mm

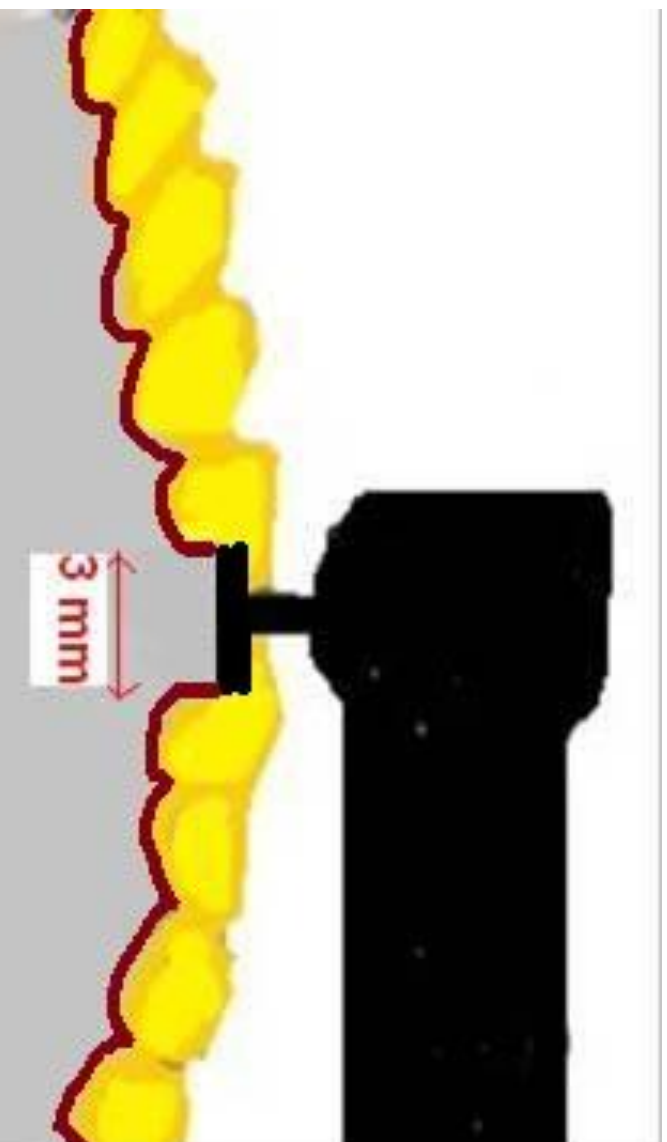

deprogramator - użytkowanie

- użytkowanie deprogramatora rozpocznij min. 14 dni przed kursem
- zakładaj deprogramator zawsze w nocy
- noś deprogramator w dzień tak długo jak to jest możliwe
- zdejmuj deprogramator do jedzenia
- koniecznie załóż deprogramator na noc poprzedzając kurs i rano po śniadaniu
- w razie zaostżenia się objawów skontaktuj się z prowadzącym j.glebocki@lovedentistry.clinic